


オムロン携帯型心電計 HCG-801

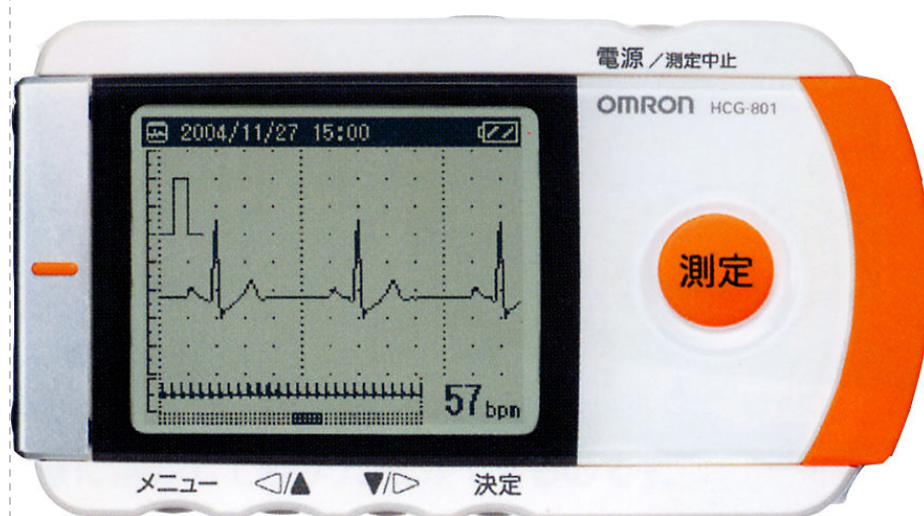

印刷しますと実物大となります。大きさをお確かめ下さい。

← 折り曲げて胸に当てると実際に測定する際のイメージがお分かりになると思います。

動悸などの症状をその場で記録、診察に活かせる心電図波形

胸が痛い、動悸や息切れがするといった症状は、狭心症や心筋梗塞のような心臓病によるものかもしれません。オムロンの携帯型心電計なら、家庭や外出先で動悸などの症状が起きたその時の心電図波形を、約30秒で測定。

医師に見せることで、的確な診療に活かしてもらうことができるのです。多くの医師が、患者さんが測った心電図波形を見たり、動悸などの症状の起きた状況や時間帯、頻度等を知ることが診断に有用と考えています。



オムロン携帯型心電計の特徴

- 動悸などの症状を、その場で簡単に記録できる。
- 医師の診断に活かせる波形精度の実現。
- 「HCG-801」を診断に活用できる医療機関のご案内サービス。
- SD カードをご使用になりますと、300 回まで記録・保存が可能です。
- ペースメーカーご使用の方は、かかりつけの先生にご相談ください。




測定方法




1. 右手の人差し指を指電極全体に当てて持ちます。



2. 素肌の左乳頭の約5cm下に胸電極を密着させます。そのまま測定スイッチを押して約30秒で測定完了。

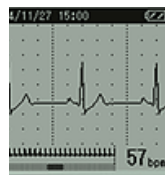

測定解析

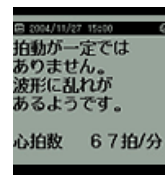


心電図の正確な解釈は、専門知識を持つ医師が行う必要があります。オムロン携帯型は、医師による診療を前提とした、詳細な波形情報の表示を実現。また、測定5回分までをメモリ保存できるので、早期治療に役立てることができます。測定した心電図は機器の内部で解析され、メッセージで表示。その解析アルゴリズムには医療用心電計と同等の技術が活用されています。また、心拍数を同時に表示します。

心電図から分かること

- RR間隔の乱れは、心拍のリズムが乱れていることを表します。
 - 心筋梗塞や狭心症の場合、ST部分の上昇や下降が見られ、主に虚血性心疾患をみとめときのポイントとなります。
- ※波形に異常があった場合、その形の特徴によってさまざまな心臓病の可能性が高まります。ただし、波形に異常があっても心臓病でない場合もあり、その診断には専門的知識が必要となります。家庭で記録した結果は、自己判断せず、必ず医師の診断を受けてください。→早期診断・早期治療！

【心電図】

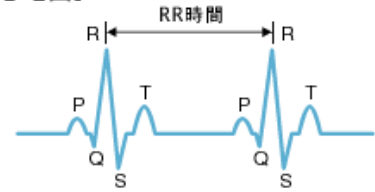

P波…心房の活動を示しています。
QRS波…心室の収縮を示しています。
T波…収縮した心臓がもとに戻る過程を示しています。

<主な仕様>		電源	単4形アルカリ乾電池2本
販売名	オムロン携帯型心電計 HCG-801	電源寿命	単4形アルカリ乾電池使用時約400回(室温22℃で1日1回測定の場合)
誘導方式	双極1チャンネル	使用環境温湿度	+10～+40℃・30～85%RH
心拍計数範囲	2～200 拍/分	保存環境温湿度	-20～+60℃・10～95%RH
表示	グラフィック液晶表示	本体質量	130g(電池含む)
メモリ	測定5回分を記録(本体内部メモリ使用時)	外形寸法	幅121×高さ67×奥行き24mm
電撃保護	内部電源機器B形装着部	医療用具承認番号	21600BZZ00473
付属品	お試用電池(単4アルカリ乾電池2本)、取扱説明書、購入者記録票(品質保証書付)、収納ケース、クイックマニュアル、ユーザー登録カード		

※本体ご購入と同時にSDカード・印刷ソフト・いい病院の本の購入も可能です。

※写真・資料の無断のご利用はご遠慮下さい。



本機にSDカードを挿入しますと300件まで記憶可能となります。



測定した心電図データを閲覧、印刷するソフトウェアです。印刷可能なデータは、SDメモリーカードに記録されたデータが対象となります。



朝日新聞社出版の【手術数でわかるいい病院 2015 全国&地方別データブック】



販売元

有限会社 クリエイト

〒828-0026 福岡県豊前市清水町119

Tel 0979-82-4812 Fax 0979-82-4803

ホームページアドレス

<http://www.yume-shop.com/> (夢ショップドットコム)

ご不明な点やご購入に際しましては、下記にご連絡下さい。

☎0120-592-834 (呼吸にやさしい)

担当：中川 (日本商工会・商工会議所認定 一級販売士)

オムロン携帯型心電計 HCG-801 お申し込み用紙

FAX番号:0979-82-4803 TEL 番号:0120-592-834(呼吸にやさしい)

(メモされてお電話でお申し込みになる場合にもご利用下さい。)

■ ご 依 頼 主	
お 名 前	
ご 住 所	〒 -
電話番号	
プレゼント	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し (有りの場合、 ラッピング番号 をご記入下さい)
コ メ ント	

お支払い方法	1. 代金引換 ・ 2. 銀行振込(ご入金確認後の発送となります)
発送のご連絡	1. 必 要(連絡先:) ・ 2. 不 要

商品のご注文					
商 品 名	SD カード: 当社保証タイプ	SD カード: オムロン社純正	印刷ソフト	いい病院の本	初期設定(無料)
オムロン携帯型 心電計 HCG-801	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要
	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要	必要 ・ 不要

※初期設定とは、お届け後お客様がすぐにお使いいただけるよう、電池の挿入・時計合せ・SDカードの挿入(SDカードをご購入いただいたお客様のみ)の設定をさせていただきます。

●以下がお支払い金額となります。※SDカード・印刷ソフト・いい病院の本は単独で購入できません。

- ・オムロン製心電計 HCG-801 本体(税込 24,192 円)
- ・SD カード: 当社保証タイプ(税込 864 円)
- ・SD カード: オムロン社純正(税込 2,268 円)
- ・印刷ソフト(税込 2,160 円)
- ・「いい病院 2015」の本(税込 770 円)

ご希望事項: _____

0979-82-4803

裏面時確認用
0084-85-4803